BRADY

Laboratory Identification

バーコードを読み取るだけのシンプル操作で、エラーをスピーディに検出。

取り違え防止３点認証システム

クリニックスタッフさんのID






患者さんのID





工程管理履歴レポート

検体管理ラベル

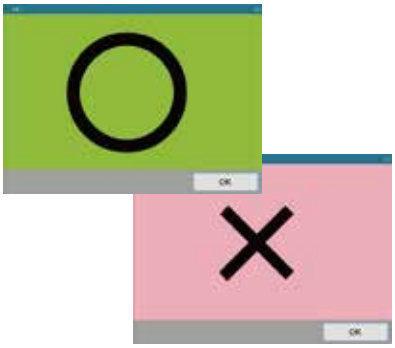

正誤判定

取り違え防止３点認証システムは、バーコードの読み取りで

検体の取り違えなどのエラー防止

作業担当メンバーの管理

工程履歴管理

ができます。


プリント印字は、見やすく読みやすく手で書く手間やストレスをなくします。



バーコードは、誤読などのヒューマンエラー防止に効果的です。



低コスト・短期間で導入できます。

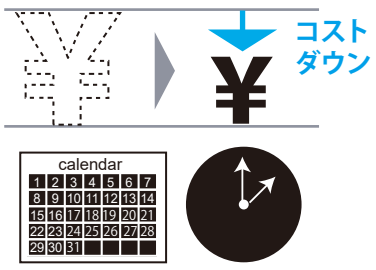

BRADY

Laboratory Identification

① 3点認証システムを起動し、スタート画面の「3点認証」をクリック




② 作業担当者のIDを読み取ると、画面にIDが表示。



③ 患者さんのマスターデータを読み取る。




④ 工程をリストから選択

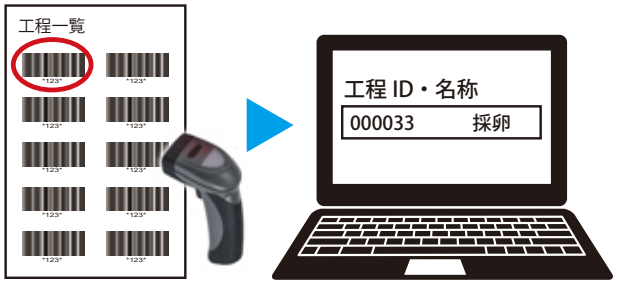

⑤ 容器に貼ったバーコードラベルを読み取る。



⑥ 同一の患者さんのものか正誤判定が出来る。

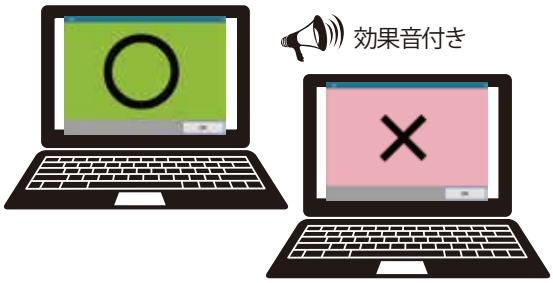

システム内訳

- 3点認証システムソフトウェア
- ラベルデザインソフトウェアCODESOFT（コードソフト）
- BBP™12熱転写ラベルプリンター
- バーコードリーダー　・ラベル（工程毎に適した基材）
- インクリボン（ラベル基材に適したもの）



これらの工程履歴は、データ出力（csv形式）できます。

出力項目：日付、時刻、担当者ID・名、工程ID・名称、患者さんID、容器ID、認証結果



動作環境

対応OS	Windows®10以降
	※ Windowsは、マイクロソフト社の米国およびその他の国々における登録商標です。
ディスプレイ	解像度1024ピクセル×768ピクセル
メディア接続	1台以上のCD-ROMドライブ、USBポート2基
備考	リモートデスクトップ環境での使用は不可。

※記載内容は、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではありません。※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
※ご購入前に、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をおすすめいたします。※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

製品に関するお問い合わせは

BRADY 日本ブレイディ株式会社

https://www.brady.co.jp

本　　社　〒192-0012 東京都八王子市左入町 652-1
LOGIPLACE 八王子 1F・4F
Tel.042-655-2531（代）　Fax.042-655-2556

関 西 営 業 所　〒663-8202 兵庫県西宮市高畑 1-25
Tel.0798-31-1590　　Fax.0798-31-1591

東 北 オ フ ィ ス　〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 6-9-804
Tel.080-1298-0493　　Fax.042-655-2556（本社転送）

通販サイト シートンダイレクト.jp　SETON http://www.setondirect.jp/

2025IMF_2K